

高级创伤护理管理

创新性医用级泡绵, 用于急性和慢性创伤





博滤克斯®创伤护理泡绵 最佳的创伤护理方案

我们的高性能医用泡绵具有多种优势，致力于患者的伤口愈合和舒适度。半阻塞的泡绵基质为伤口提供保护，兼具透气功能，促进湿性愈合。我们的泡绵系列产品多样化，具有多种不同的物理性能。


适用于各种创伤

伴中度至重度引流的部分至全层创伤
溃疡、撕裂伤、切口、移植供体的部位、造口周围的伤口和受感染的伤口
初级敷料、辅助敷料和患者支持

适用于各种创伤护理

多种尺寸、厚度和吸收力
不粘贴，高度伏贴身体轮廓
活性成分、添加剂、覆膜等等

医用泡绵 理想的创伤护理敷料

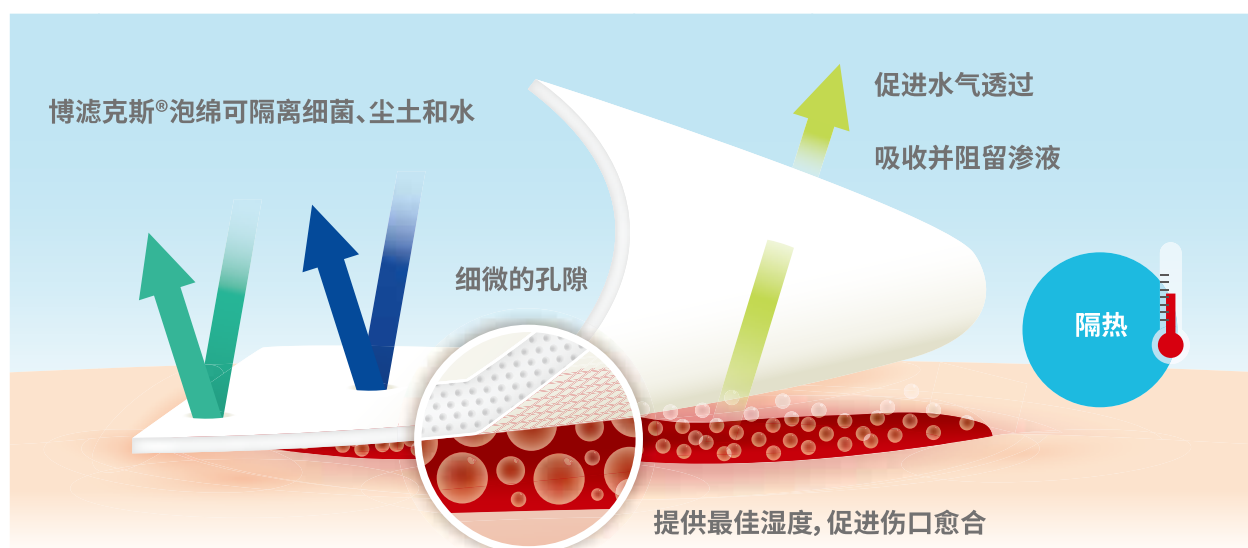

特色博滤克斯®创伤护理泡绵

为患者提供更佳的创伤护理 – 代工厂的更实惠之选

MEDISPONGE® 50PW

标准性能

强力有效地控制伤口渗液
吸收高达18倍产品重量的渗液
厚度由注膜而成, 触肤柔软

MEDISPONGE® SUPERSOFT™ 60P

先进性能, 促使良好愈合

吸收高达18倍产品重量的渗液
孔隙细微, 最大限度地减少粘连
高度伏贴身体轮廓

MEDISPONGE® SUPERSOFT™ 64P

SuperSoft™让患者倍感舒适, 强度可耐高速转换

吸收高达15倍产品重量的渗液
超细微的孔隙, 用于组织增强的肉芽
哑光面触感柔软
光泽面用于提高复膜的粘合强度
厚度由注膜而成 - 薄至1.25毫米
需要内衬

MEDISPONGE® 30W

多样化的产品及性能

吸收高达15倍产品重量的渗液
延展性更高, 更伏贴身体轮廓
厚度由削薄而成, 可制成更宽更厚的卷轴
开放性表面可以增强活性成分、复合材料、覆膜的性能及其他更多性能



特色泡绵系列: 如需所有中度至高度渗出液产品的信息, 请联系博滤克斯®

特性	MS 50PW 3 毫米 P/N 921027	MS SS 60P 3 毫米 P/N 934005	MS SS 64P 2.5 毫米 P/N 937005	MS 30W 3 毫米 P/N 903210	抗菌泡绵4.5 毫米 P/N X80262
拉伸断裂力	1.07公斤 (2.36 磅)	0.47 公斤 (1.04 磅)	0.52 公斤 (1.15 磅)	0.80 公斤 (1.76 磅)	1.02 公斤 (2.25 磅)
断裂时的延展性	182%	147%	170%	320%	225%
孔隙数量(顶部表面)	120 PPI 单位	170 PPI 单位	160 PPI 单位	100 PPI 单位	170 PPI 单位
自由溶胀吸收容量	47.5 克/100 平方厘米	52.2 克/100 平方厘米	44.2 克/100 平方厘米	47.9 克/100 平方厘米	79.5 克/100 平方厘米

可依据需提供完整的测试数据和信息

特色博滤克斯®专业医用泡绵

专为患者和品牌厂商解决问题

纳米银抗菌泡绵

具有广谱抗菌特性的银有助于控制医疗相关感染。

含纳米银的亲水性聚氨酯泡绵

超强保护, 患者舒适

活性成分均匀分布于泡绵中


持久均匀地释放

使用较少的银, 但功效更持久更强

对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌以及真菌的功效> 99.99%

不粘贴, 吸收快速高效

银的抗菌作用

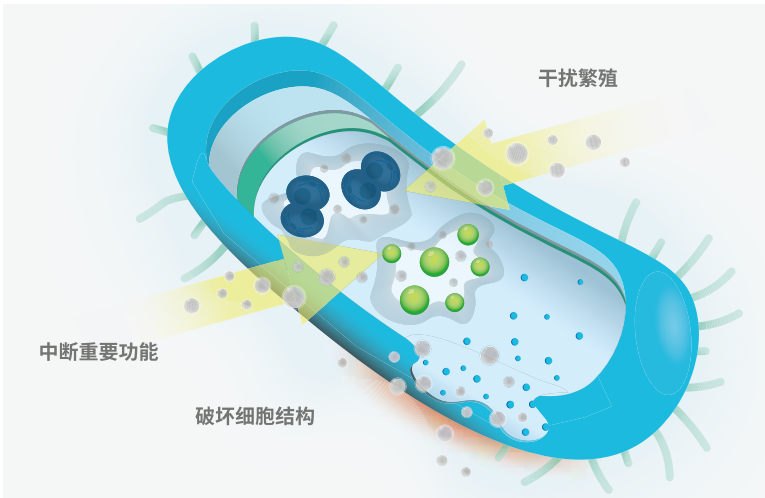

疤痕控制泡绵

博滤克斯®的创伤护理专长为疤痕愈合以及最小化提供绝佳的基础。我们的泡绵将压力疗法所需拉伸强度与愈合所需的最佳湿度和氧气水平结合在一起。

HSS X-7™ 泡绵

疤痕最小化所需的最佳湿度和压力水平

减少孔隙数量以获得更高的湿度

350% 的延展率, 保证压力疗法的顺利进行
密度更低, 更舒适, 更不影响日常穿着

疤痕控制泡绵						
特性	SuperSoft™	HSS X-7™	HSS X-7™	HSS X-7™	HSS X-7™	HSS X-7™
	P/N 902007	P/N 901036	P/N 901035	P/N 901023	P/N 901001	P/N 901009
拉伸断裂力	3.74 公斤 (8.25 磅)	1.00 公斤 (2.21 磅)	1.68 公斤 (3.70 磅)	3.27 公斤 (7.21 磅)	4.06 公斤 (8.95 磅)	4.93 公斤 (10.9 磅)
断裂时的延展性	260%	335%	335%	335%	370%	370%
孔隙数量 (顶部表面)	190 PPI 单位	180 PPI 单位	180 PPI 单位	180 PPI 单位	168 PPI 单位	168 PPI 单位
自由溶胀吸收容量	75.0 克 /100 平方厘米	54.1 克 g/100 平方厘米	105.3 克 g/100 平方厘米	200.1 克 g/100 平方厘米	不适用	不适用

可应要求提供完整的测试数据和信息



博滤克斯®:理想的泡绵供应商



创伤护理泡绵的独立生产商

博滤克斯®不仅是全球范围内为数不多的医用泡绵的独立生产商之一,而且是最大的一家。我们可以为世界各地几乎所有的品牌厂商研发新型泡绵以及白色标签。



配方定制和委托生产

与其他竞争对手不同,我们生产自己的预聚物,它是医用泡绵的基础材料。博滤克斯®也可根据客户需求加入添加剂和活性成分,同时保证完善的质量控制。



与医疗设备制造生物相容

顶尖的独立实验室的测试证明,我们用于开放性伤口的所有泡绵敷料都是完全生物相容的。我们所有的泡绵均采用符合国际标准化组织 (ISO) 标准的医疗设备生产,以确保最高的纯净度和可靠性。

博滤克斯®:全球品牌厂商信赖的合作伙伴

我们的销售渠道遍布全球,让北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚的客户能够以最高的效率和可信度将其产品推向市场。

全面转换和功能

缩短交货时间,降低生产成本,提升价值



削薄



纵剪



模切



覆膜



博滤克斯®医用泡绵发展 自始至终的质量保证

除了促进健康和保健的产品之外，博滤克斯®还给予更多。我们的质量保证标准会让客户在美国食品药品监督管理局 (FDA) 和国际监管部门的审批流程变得更加容易、更高效。



国际标准化组织 (ISO) 认证的医疗设备生产

符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 和全球监管机构的规章制度



在医疗设备监管的审查过程中协助客户

简化监管程序的文档



对生产制造过程进行验证

根据美国食品药品监督管理局 (FDA) 和国际标准化组织 (ISO) 的标准验证产品的一致性



工程服务协议

详述生产过程，让客户充满自信



关注公众号



美洲地区

博滤克斯®公司
美国佐治亚州费尔本

电话: +1 770 964 1421
传真: +1 770 969 0954
info.POREX.amrs@
filtrationgroup.com



大中华地区

博滤克斯中国
中国上海

工厂电话: +86 574 26858761
工厂传真: +86 574 26886964
info.POREX.china@
filtrationgroup.com



欧洲、中东、非洲地区

博滤克斯®科技有限公司
德国亚琛

电话: +49 241 9105250
传真: +49 241 91052516
info.POREX.emea@
filtrationgroup.com



亚太地区

博滤克斯®科技有限公司
马来西亚雪兰莪州沙阿兰

电话: +603 51913308
传真: +603 51923308
info.POREX.apac@
filtrationgroup.com

© 2018 Porex Corporation. POREX 是博滤克斯公司的注册商标。版权所有。